

+ Trin 4 - TÆND for enheden

Bemærk: Enheden bør kun tændes, når du er klar til at sove.



+ Trin 5 - I løbet af natten

- Hver gang du klikker på knappen, vil displayet lyse op i et minut.
- Hvis du har brug for at stå op om natten, skal du ikke fjerne enheden eller sensorer.
- Tryk ikke på nogen knapper, hvis du står op i løbet af natten.
- Hvis du skal på toilettet, må WatchPAT™ 300 ikke blive våd.
- Brug af WatchPAT™ 300-enheden må ikke forårsage ubehag eller smerte. Hvis du mærker en uudholdelig smerte, skal enheden fjernes og helpdesk kontaktes.

+ Trin 6 - Næste morgen

Når du vågner:

- 6a.** Enheden slukker automatisk. Der er ingen SLUK-knap.
- 6b.** Fjern fingerproben og RESBP-sensoren
- 6c.** Fjern den fra dit håndled.
- 6d.** Læg alle enhedens dele tilbage på plads igen i beholderen.

⚠️ Vigtige bemærkninger

- Forsøg ikke at tilslutte eller frakoble nogen del af enheden.
- Forsøg ikke at introducere nogen fremmed genstand i enheden.
- Forsøg ikke at tilslutte WatchPAT 300 til en strømforsyning eller anden enhed, maskine eller computer.
- Forsøg ikke under nogen omstændigheder at løse et problem selv.
- Fingersonden er til engangsbrug. Hvis der tilsluttes en brugt sonde, vises en fejlmeddelelse. Der er risiko for krydskontaminering ved brug af en brugt sonde.
- Efter behov og i tilfælde af en alvorlig hændelse, skal vores servicekontor kontaktes med oplysning om hændelsen og for at modtage yderligere anvisninger.
- I tilfælde af en alvorlig hændelse, skal de relevante myndigheder også orienteres.

4a. Tryk hårdt på afbryderknappen, indtil displayet begynder at lyse. Næste vindue viser "Vent venligst på test..." ✓

Efter et par sekunder vil en "GODNAT!!!" besked vises. Displayet SLUKKER efter en kort periode.

4b. I tilfælde af et problem vil "TEST AFBRUDT" ✗ vises, og du bør ringe til support på 1-888-748-2627

Du er nu klar til at sove.

4c. Hvis din finger ikke er placeret korrekt i proben, vises en fejlbesked, der beder dig om at indsætte fingeren korrekt. Vent indtil enheden slukkes og indsæt derefter fingeren og prøv igen.

Spørgsmål?
Ring til supportens telefonnummer
1-888-748-2627

REF:OM2193380-da Rev.5 2023-02



Trin for trin guide

WatchPAT™ 300
Søvntest i hjemmet



For en instruktionsvideo, gå til:
www.watchpat-howtouse.com

itamar
medical

itamar
medical

| Sundhed helt enkelt

www.itamar-medical.com | infousa@itamar-medical.com

Verdensomspændende:

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Israel
Tlf.: +972 4 617 7000
Fax + 972 4 627 5598

USA:

Itamar Medical Inc.
3290 Cumberland Club Drive, Suite
100 Atlanta, Georgia 30339, USA
Tlf. 1 888 748 2627

EC REP Arazy Group GmbH
The Squaire 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main,
Tyskland

Advarsel: Føderal amerikansk lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller efter henvisning fra en læge.

Copyright © 2023 Itamar Medical Ltd. WatchPAT og PAT er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Itamar Medical Ltd., som er et datterselskab tilhørende ZOLL Medical Corporation, i USA og/eller andre lande.

WatchPAT™ 300 - Trin for trin guide

Denne guide skal benyttes, efter at din læge har vist dig, hvordan du bruger WatchPAT 300-enheden.



- A - Tænd/Sluk- knap
- B - Åndedrætsbesvær, snorken og kropsspositionssensor (RESBP)
- C - Fingersonde

Før påførelse af WatchPAT™ 300:

- Det anbefales at påføre WatchPAT 300-enheden på den hånd, du ikke normalt bruger.
- Proben kan bæres på enhver finger undtagen tommelfingeren. Hvis du har store fingre, anbefales det at benytte lillefingeren.
- Før brug fjernes tætsiddende tøj, ringe, ure og smykker.
- Fjern neglelak og kunstige negle fra testfingeren, og sørg for, at fingerneglen er klippet kort.

Bemærkninger:

- Når du har tændt for WatchPAT™ 300-enheden, kan den ikke slukkes igen.
- Påfør kun enheden og tænd den, når du er klar til at sove.
- Voksentilsyn kan være påkrævet for at påføre enheden.
- Billederne i denne demonstrationsguide gælder for venstre hånd; lignende proces kan anvendes for højre hånd.




Etuiet indeholder:

- Referenceguiden
- Enheden med fingerprobe
- Åndedrætsbesvær, snorken og kropsspositionssensor (RESBP)


Support telefonnummer 1-888-748-2627



+ Trin 1 - Anvendelse af snorke- og kropsspositionssensoren (RESBP)

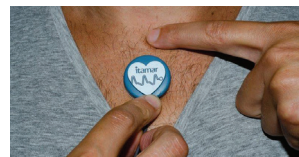


- 1a. Til mænd: trim tykt hår på brystet, hvis nødvendigt.
- 1b. Før RESBP-sensoren gennem dit ærme og op til halsåbningen.

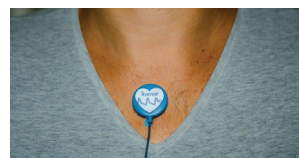

- 1d. Sæt sensoren fast på midten af din øvre brystknogle lige under halsens forside. Sørg for, at billedet på RESBP-sensoren vender opad.



- 1c. Træk det hvide papir fra bagsiden af sensoren.

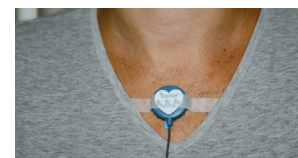

- 1e. Fastgør RESBP-sensoren med yderligere medicinsk tape.

+ Trin 2 - Anvendelse af WatchPAT 300-enheden



- 2a. Spænd enheden fast på din ikke-dominerende hånd.
- 2b. Luk håndledsremmen (ikke for stramt).

+ Trin 3 - Påfør fingerproben



- 3a. Proben kan bæres på enhver finger undtagen tommelfingeren. Hvis du har store fingre, anbefales det at benytte lillefingeren.
- 3b. Sæt fingeren ind i proben, indtil du kan mærke dens ende. Klistermærket TOP skal være placeret på toppen af din finger (oven på neglen).

- 3c. Tryk spidsen af proben mod en hård overflade (for eksempel et bord, ben eller lignende)
- 3d. Træk og fjern TOP-mærkatet helt fra proben.