

+ Stap 4 - Het apparaat AAN zetten

Let op: Het apparaat pas aanzetten als u gaat slapen.



4a. Druk stevig op de aan-uitknop totdat het lampje gaat branden. Volgende scherm "Even geduld a.u.b, aan het testen..." ✓
Na een paar seconden wordt het bericht 'WELTERUSTEN' weergegeven. Het display gaat na een tijdje uit.

4b. Als zich een probleem voordoet, verschijnt "TEST AFGEBROKEN" ✗. Bel dan de helpdesk op 1-888-748-2627

U bent nu klaar om te gaan slapen.

4c. Als uw vinger niet in de probe zit, verschijnt er een foutmelding met de instructie om uw vinger in de probe te steken. Wacht totdat het apparaat uit gaat. Steek vervolgens uw vinger in de probe en probeer opnieuw.

+ Stap 5 - Tijdens de nacht

- Elke keer als u op de knop drukt, wordt het display 1 minuut lang verlicht.
- Het apparaat of de sensors niet verwijderen als u 's nachts op moet staan.
- Druk niet op knoppen als u 's nachts moet opstaan.
- Zorg ervoor dat de WatchPAT™ 300 niet nat wordt als u gebruik maakt van de badkamer.
- De WatchPAT™ 300 hoort geen ongemak of pijn te veroorzaken. Verwijder het apparaat en bel de helpdesk als u ondraaglijk ongemak ervaart.

+ Stap 6 - De volgende ochtend

Wanneer u wakker wordt:

- 6a.** Het apparaat schakelt automatisch uit. Er is geen UIT-knop.
- 6b.** Verwijder de vingerprobe en de RESBP-sensor
- 6c.** Verwijder het van uw pols.
- 6d.** Plaats alle onderdelen terug in de opbergcase.



Belangrijke opmerkingen

- Probeer geen enkel onderdeel van het apparaat aan te sluiten of los te koppelen.
- Probeer geen vreemde voorwerpen in het apparaat te introduceren.
- Probeer de WatchPAT™ 300 niet aan te sluiten op een stroomvoorziening of ander apparaat, machine of computer.
- Probeer een probleem nooit zelf op te lossen.
- De vingerprobe is voor eenmalig gebruik. Als een gebruikte probe wordt aangesloten, verschijnt er een foutmelding. Houd er rekening mee dat het gebruik van een gebruikte probe kruisbesmetting kan veroorzaken.
- Neem indien nodig of bij een ernstig incident contact op met ons servicekantoor om het incident te melden en verdere instructies te ontvangen. Meld een ernstig incident ook bij de bevoegde autoriteit.

Hebt u vragen?
Bel het nummer van onze helpdesk
1-888-748-2627

REF:OM2193884 Rev.5 2023-02



Stapsgewijze
handleiding

WatchPAT™ 300
SLAAPONDERZOEK THUIS



Voor een instructievideo, ga naar:
www.watchpat-howtouse.com

itamar
medical

itamar
medical

| Gezondheidszorg eenvoudig gemaakt

www.itamar-medical.com | infousa@itamar-medical.com

Wereldwijd:

Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, Postbus 3579

Caesarea 3088900, Israël

Tel.: + 972 4 617 7000

Fax + 972 4 627 5598

USA:

Itamar Medical Inc.

3290 Cumberland Club Drive, Suite

100 Atlanta, Georgia 30339, USA

Tel 1 888 748 2627

EC REP Arazy Group GmbH

The Squire 12, Am Flughafen,

60549 Frankfurt am Main,

Duitsland

Let op: Dit apparaat mag op grond van de Amerikaanse federale wetgeving uitsluitend worden verkocht door of namens een zorgprofessional.

Copyright © 2023 Itamar Medical Ltd WatchPAT en PAT zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Itamar Medical Ltd., een dochteronderneming van ZOLL Medical Corporation, in de Verenigde Staten en/of andere landen.

WatchPAT™ 300 - Stapsgewijze handleiding

Gebruik deze handleiding pas nadat uw zorgprofessional u heeft laten zien hoe u de WatchPAT™ 300 moet gebruiken.



- A - Aanknop
- B - Respiratory Effort Snoring and Body Position sensor (RESBP)
- C - Vingerprobe

Voordat u de WatchPAT™ 300 omdoet:

- Het is aan te raden om de WatchPAT 300 aan uw niet-dominante hand te bevestigen.
- De sensor kan om elke vinger gedragen worden, behalve de duim. Als u grote vingers hebt kunt u beter uw pink gebruiken.
- Verwijder voor gebruik strakke kleding, ringen, horloges en andere sieraden.
- Verwijder nagellak en kunstnagels van de testvinger en zorg ervoor dat de vingernagel kortgeknipt is.

Opmerkingen:

- Zodra u de WatchPAT™ 300 hebt ingeschakeld kan deze niet meer worden uitgeschakeld.
- Plaats het apparaat en schakel het alleen aan als u klaar bent om te gaan slapen.
- Er kan toezicht van een volwassene nodig zijn om het apparaat te bevestigen.
- De afbeeldingen in de gids zijn voor de linkerhand. Hetzelfde proces kan worden toegepast voor de rechterhand.




De opbergcase bevat:

- Deze referentiegids
- Apparaat met vingerprobe
- Respiratory Effort Snoring and Body Position sensor (RESBP)


Telefoonnummer van de helpdesk is
1-888-748-2627




+ Stap 1 - Breng de Respiratory Effort Snoring and Body Position sensor (RESBP) aan

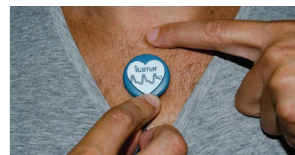

- 1a. Voor mannen: knip of scheer dik borsthaar indien nodig.
- 1b. Voer de RESBP-sensor door de mouw van uw nachthemd tot aan de halsopening.

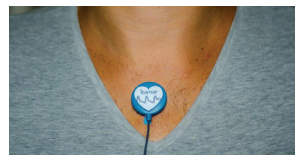

- 1d. Bevestig de sensor in het midden bovenaan uw borstbeen, net onder uw hals. Zorg dat de afbeelding op de RESBP-sensor naar boven wijst.

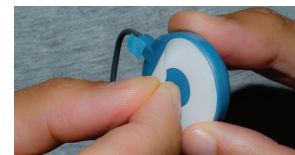

- 1c. Verwijder het witte papier aan de achterkant van de sensor.



- 1e. Houd de RESBP-sensor op zijn plaats met medische tape.

+ Stap 2 - Aanbrengen van de WatchPAT™ 300



- 2a. Bind het apparaat om uw niet-dominante hand.
- 2b. Maak de polsband vast (niet te strak).

+ Stap 3 - Aanbrengen van de vingerprobe



- 3a. De sensor kan om elke vinger gedragen worden, behalve de duim. Als u grote vingers hebt kunt u beter uw pink gebruiken.
- 3b. Steek uw vinger in de probe met de tekst 'TOP' moet zich op de bovenkant van uw vinger bevinden (boven de nagel).



- 3c. Druk de punt van de probe tegen een hard oppervlak (zoals een tafel).
- 3d. Verwijder de TOP-sticker en trek deze helemaal uit de probe.