

+ Steg 4 - Att PÅ enheten

OBS! Enheten ska endast på när är .



- 4a.** Tryck bestämt på strömbrytaren till displayen tänds. Nästa skärm "Vänligen ..."
Efter några sekunder visas meddelandet "GOD NATT!!!" ✓ . Displayen stängs AV efter en kort stund.
- 4b.** Om problem visas " AVBRUTE" ✗ , kontakta vår helpdesk på 1-888-748-2627
Nu är .
- 4c.** Om fingret inte befinner sig inuti sonden som uppmanar till att sticka in fingret. Vänta tills enheten stängs av, stick in fingret och försök igen.

+ Steg 5 - Under natten

- trycker på knappen lyser displayen under en minut.
- Om du måste resa på dig under natten får du varken avlägsna enheten eller sensorerna.
- Tryck inte på några knappar om du behöver stiga upp under natten.
- Om du befinner dig i badrummet, se till att WatchPAT™ 300 inte blir blöt.
- WatchPAT™ 300 ska inte förorsaka något obehag eller smärta. Skulle du uppleva outhärdligt obehag, avlägsna enheten och ring till kundtjänst.

+ Steg 6 - Nästa morgon

När vaknar:

- 6a.** Enheten kommer att stängas av automatiskt. Det finns ingen AV-knapp.
- 6b.** Avlägsna fingersonden och RESBP-sensorn
- 6c.** Ta av enheten från handleden.
- 6d.** Sätt tillbaka alla delar i bärväska.
- ⚠ Viktiga observationer**
- Försök inte att ansluta till eller koppla ur någon del av enheten.
 - Försök inte att föra in något främmande föremål i enheten.
 - Försök inte att ansluta WatchPAT™ 300 till ett eluttag eller en annan enhet, maskin eller dator.
 - Försök inte, under inga villkor, att lösa ett problem på egen hand.
 - Fingersonden är avsedd för engångsbruk. Om en använd sond ansluts visas ett felmeddelande. Vänligen uppmärksamma att en använd sond kan orsaka korskontaminering.
 - Om så behövs eller i händelse av ett allvarligt tillbud, kontakta vårt tjänstekontor för att rapportera tillbudet och för att få ytterligare information.
- I händelse av ett allvarligt tillbud, vänligen rapportera även till ansvarig myndighet.

Har du ?
Ring vårt helpdesknnummer
1-888-748-2627

REF:OM219388 Rev.5 2023-02



Vägledning steg
för steg

WatchPAT™ 300
Sovtest i hemmiljö



För att se en video gå till:
www.watchpat-howtouse.com

itamar
medical

| Hälsa på ett enkelt sätt

www.itamar-medical.com | infousa@itamar-medical.com

Världen över:

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Israel
Tel: + 972 4 617 7000
Fax + 972 4 627 5598

USA:

Itamar Medical Inc.
3290 Cumberland Club Drive, Suite
100 Atlanta, Georgia 30339, USA
Telefon: +1 888 748 2627

EC REP Arazy Group GmbH
The Squire 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main,
Tyskland

: Enligt federal lag i USA får denna anordning endast säljas av eller på order av .

Upphovsrätt © 2023 Itamar Medical Ltd. WatchPAT och PAT är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Itamar Medical Ltd., ett dotterbolag till ZOLL Medical Corporation, i USA och/eller andra länder.

itamar
medical

WatchPAT™ 300 - steg för steg

Denna ska användas efter det att läkaren har visat hur man använder WatchPAT™ 300-enheten.



- A - Strömbrytare
- B - Sensor för andningsansträngning, snarkning och kroppsposition (RESBP)
- C - Fingersond

Innan WatchPAT™ 300 sätts fast:

- Vi rekommenderar att placera WatchPAT™ 300 -enheten på din icke-dominanta handled.
- Fingersonden kan bäras på vilket finger som helst, med undantag för tummen. stora fingrar rekommenderas att använda lillfingret.
- Ta av åtsittande kläder, ringar, klockor och andra smycken före användningen.
- Avlägsna nagellack och konstgjord nagel från testfingret och se till att nageln är kortklippt.

OBS!

- När väl WatchPAT™ 300-enheten har slagits på, så kan den inte stängas av.
- Sätt fast enheten men slå på den endast när du .
- Vuxen hjälp kan behövas för att sätta på enheten.
- Bilderna i vänster hand, men ett liknande förfarande kan tillämpas för höger hand.




Bärväskan innehåller:

- Denna
- Enhet med fingersond
- Sensor för andningsansträngning, snarkning och kroppsposition (RESBP)

Helpdesk nummer
1-888-748-2627



+ Steg 1 - Sätt fast sensorn för andningsansträngning, snarkning och kroppsposition (RESBP)

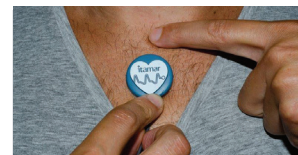

1a. Män med tjockt brösthår bör raka det.


1b. För upp RESBP-sensorn genom ärmen på nattsjortan till halsöppningen.



1d. Sätt fast sensorn mitt på det övre bröstbenet, precis nedanför halsens framsida. Säkerställ att bilden på RESBP-sensorn är vänd uppåt.



1c. Dra av det vita skyddspapperet från baksidan på sensorn.

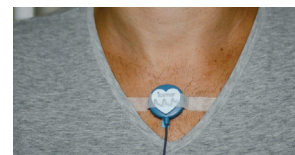

1e. Fäst RESBP-sensorn med ytterligare medicinsk tejp.

+ Steg 2 - Sätt fast WatchPAT™ 300-enheten



- 2a.** Sätt på enheten på din icke-dominanta handled.
- 2b.** Stäng armbandet (inte för hårt).

+ Steg 3 - Sätt fast fingersonden



- 3a.** Fingersonden kan bäras på vilket finger som helst, med undantag för tummen. stora fingrar rekommenderas att använda lillfingret.
- 3b.** Sätt in fingret i sonden tills du känner ett stopp. Etiketten märkt TOP ska befinna sig på fingrets ovansida (ovanför nageln).



- 3c.** Tryck spetsen på sonden mot en fast yta (exempelvis bord eller ben).
- 3d.** Dra av och avlägsna TOP-fliken helt ur sonden.