

+ Trinn 4 - Slå PÅ enheten

Merk: Enheten skal ikke slås på før du er klar til å sove.



- 4a.** Trykk godt på av/på-knappen til skjermen lyser. Neste skjermbilde "Please wait Testing..." (Vent litt, tester ...) Etter noen sekunder vises meldingen "GOOD NIGHT!!!" ✓ (God natt!!!). Skjermen vil SLÅS AV etter en kort periode.
- 4b.** Hvis det har oppstått et problem, vises meldingen "TEST ABORTED" ✗ (Test avbrutt). Ring i såfall brukerstøtte på 1-888-748-2627 **Nå er du klar til å sove.**
- 4c.** Hvis fingeren ikke er inne i sonden, vil en feilmelding be deg sette inn fingeren. Vent til enheten slås av, sett inn fingeren og prøv igjen.

+ Trinn 5 - Om natten

- Når du trykker på knappen, lyser skjermen i et minutt.
- Hvis du må stå opp om natten, må du ikke ta av enheten eller sensorene.
- Hvis du må stå opp om natten, må du unngå å trykke på knappene.
- Hvis du bruker badet, må du unngå at WatchPAT™ 300 blir våt.
- Bruk av WatchPAT™ 300-enheten skal ikke føre til ubehag eller smerter. Hvis du opplever utålelig ubehag, må du fjerne enheten og ringe kundeservice.

+ Trinn 6 - Neste morgen

Når du våkner:

- 6a.** Enheten slås av automatisk. Den har ingen av-knapp.
- 6b.** Ta av fingersonden og RESBP-sensoren
- 6c.** Da dem av fra håndledet.
- 6d.** Legg alle delene tilbake i bæreevnen.



Viktige merknader

- Ikke koble til eller koble fra noen del av enheten.
 - Ikke før noen fremmedlegemer inn i enheten.
 - Ikke prøv å koble WatchPAT™ 300 til en strømforsyning eller annen enhet, maskin eller datamaskin.
 - Du skal ikke under noen omstendigheter forsøke å løse et problem på egen hånd.
 - Fingersonden er kun til engangsbruk. Hvis en brukt sonde er tilkoblet, vises en feilmelding. Vær oppmerksom på at bruk av brukt sonde kan føre til krysskontaminering.
 - Om nødvendig, eller i tilfelle en alvorlig hendelse, kan du kontakte servicekontoret vårt for å rapportere hendelsen og motta ytterligere anvisninger.
- Ved alvorlige hendelser skal også de relevante myndigheter varsles.

Spørsmål?
Ring brukerstøttenummeret vårt
1-888-748-2627

REF10M21939/4 Rev.5 2023-02



Trinnvis veiledning

WatchPAT™ 300

Søvntest til hjemmebruk



En instruksjonsvideo finnes på:
www.watchpat-howtouse.com

itamar
medical

itamar
medical

| Health Being Made Simple

www.itamar-medical.com | infousa@itamar-medical.com

Worldwide:

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Israel
Tlf.: + 972 4 617 7000
Faks + 972 4 627 5598

USA:

Itamar Medical Inc.
3290 Cumberland Club Drive, Suite
100 Atlanta, Georgia 30339, USA
Tlf. 1 888 748 2627

EF+REP Arazy Group GmbH

The Squire 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main,
Tyskland

Advarsel: I henhold til føderale lover i USA, er salg av denne enheten begrenset til lisensiert helsepersonell

Copyright © 2023 Itamar Medical Ltd. WatchPAT og PAT er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Itamar Medical Ltd., et datterselskap av ZOLL Medical Corporation, i USA og/eller andre land.

WatchPAT™ 300 - Trinnvis veiledning

Denne veiledningen skal brukes etter at fagpersonen har vist deg hvordan du bruker WatchPAT™ 300-enheten.



- A - Av/på-knapp
- B - Sensor for snorking med respiratorisk innsats og kroppsposisjon (RESBP)
- C - Fingersonde

Før du bruker WatchPAT™ 300:

- Det anbefales at du bruker WatchPAT 300-enheten på den ikke-dominante hånden din.
- Sonden kan brukes på alle fingre, unntatt tommelen. Hvis du har store fingre, anbefales det å bruke lillefingeren.
- Ta av stramme klær, ringe, klokker og andre smykker før bruk.
- Fjern neglelakk og kunstige negler fra testfingeren, og påse at neglen er kort.

Merknader:

- Når du har slått på WatchPAT™ 300-enheten, kan den ikke slås av.
- Bruk enheten og slå den på bare når du er klar til å sove.
- Tilsyn av en voksen kan være nødvendig når enheten påføres.
- Bilder i den demonstrerte veiledningen er for venstre hånd; tilsvarende prosess kan brukes for høyre hånd.




Bæreevesken inneholder:

- Denne referanseveiledningen
- Enhet med fingersonde
- Sensor for snorking med respiratorisk innsats og kroppsposisjon (RESBP)


Brukerstøttenummer 1-888-748-2627




+ Trinn 1 - Påføring av sensoren for snorking med respiratorisk innsats og kroppsposisjon (RESBP)

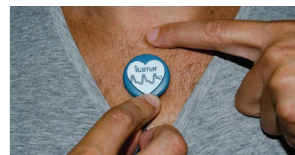

- 1a. For menn: fjern eventuelt tykt brysthår, om nødvendig.
- 1b. Ta RESBP-sensoren gjennom ermet på nattskjorten opp til nakkeåpningen.

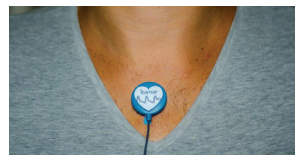

- 1d. Fest sensoren midt på av øvre brystben, like halsen. Kontroller at bildet på RESBP-sensoren er vendt oppover.

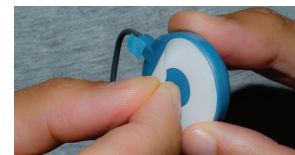

- 1c. Ta av det hvite papiret fra sensorens bakside.



- 1e. Fest RESBP-sensoren med ytterligere medisinsk tape.

+ Trinn 2 - Påføring av WatchPAT™ 300-enheten



- 2a. Fest enheten til den ikke-dominerende hånden.
- 2b. Stram til håndleddsstroppen (ikke for tett).

+ Trinn 3 - Påføring av fingersonden



- 3a. Sonden kan brukes på alle fingre, unntatt tommelen. Hvis du har store fingre, anbefales det å bruke lillefingeren.
- 3b. Stikk fingeren inn i sonden til du kjenner enden. Klistremerket merket TOP (øverst) skal sitte øverst på fingeren (over neglen).



- 3c. Trykk sondespissen mot en hard overflate (f.eks. bord, ben.)
- 3d. Trekk og fjern etiketten TOP (øverst) helt fra sonden.