

WatchPAT[®] ONE

Engangs- og hjemmetest for søvnapnø
















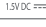


Se den trinvisse videovejledning på

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT[®] ONE

Engangs- og hjemmetest for søvnapnø

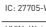Teknisk informationsmærkning

	Advarsel: Føderal amerikansk lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller efter henvisning fra en læge.
	Engangsbrug, må ikke genbruges
	Temperaturgrænse 0 °C - 40 °C
	Se brugsanvisningen
	1,5V DC --- Batteriets driftsspænding
	IP22 Indtrængningsbeskyttelse
	Type BF-anvendt del
	Føderalt id-nummer 2AP.00950E
	Producent
	Katalognummer
	Serienummer
	Fremstillingsdato
	Sidste anvendelsesdato
	I henhold til WEEE-direktivet 2012/19/EU skal alt elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) opsamlles separat og ikke bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald. Bortskaf dette produkt og alle dets dele på en ansvarlig og miljøvenlig måde.
	Skræbelig genstand, håndteres forsigtigt
	Opbevares tørt
IC: 27705-WATCHPATONE ISED Canada-certificeringsnummer	
HVIS: WatchPAT ONE Identificerer hardwarespecifikationer for produktionen	
	Medicinsk udstyr
	Japanske certificeringssymboler

REF: 1040133079 - E3.3

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte
Itamar[®] Medical-hjelpdesk på:
1-888-748-2627



www.itamar-medical.com



Vigtige bemærkninger:

- Opbevaring og driftstemperaturer 0 °C - 40 °C
- Forsøg ikke at tilslutte eller frakoble nogen del af enheden.
- Forsøg ikke at introducere nogen fremmed genstand i enheden.
- Forsøg ikke under nogen omstændigheder at lase et problem selv.
- WatchPAT[®] ONE bør ikke give ubehag eller smerte. Hvis du mærker en uudholdelig smerte, skal enheden fjernes og hjælpesk kontaktes.
- Kontroller batteriet visuelt, før det indsættes, for tegn på uddeltelse, revner, lækage eller andre fejl.


9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Israel
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598

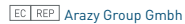
Arazy Group GmbH
The Square 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Tyskland

Trinvis vejledning

Scan QR-koden nedenfor for at downloade
WatchPAT[®] ONE-applikationen




www.itamar-medical.com

Se den trinvisse videovejledning på
watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Engangstest for søvnapnø

Trinvis vejledning

Denne vejledning forklarer dig trin for trin, hvordan du bruger WatchPAT® ONE-hjemmetest til søvnapnø korrekt.

Før du påfører WatchPAT® ONE:

- ✦ Det anbefales at påføre WatchPAT® ONE-enheten på den hånd, du ikke normalt bruger.
- ✦ Proben kan bæres på enhver finger undtagen tommelfingeren.
- ✦ Før brug fjernes tætsiddende tøj, ringe, ure og smykker.
- ✦ Fjern neglelak og kunstige negle fra testfingeren, og sørg for, at fingerneglen er klippet kort.

Bemærk: Brug kun alkaline AAA-batterier. Indsæt ikke batteriet, før du er klar til at gå i seng.

1. Før du starter dit søvnstudie, skal du sørge for at have internetadgang, din telefon, WatchPAT® ONE og PIN-koden.



Telefon



WatchPAT® ONE



Internetadgang



PIN-kode

2. Download WatchPAT® ONE-applikationen på din mobiltelefon (fås i Apple App Store og Google Play Store).



3. Åbn WatchPAT® ONE-applikationen og giv den nødvendige tilladelse til applikationen. Denne tilladelse er nødvendig for, at applikationen kan anvendes.


Tag WatchPAT® ONE ud af kassen. Klik på knappen "Forhåndsvisning" for en hurtig visning af, hvordan enheden virker.

FORHÅNDSVISNING

Tryk derefter på knappen "Klar".

KLAR

4. Indsæt batteriet i WatchPAT® ONE-enheten.

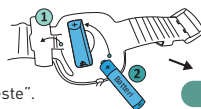

Tryk derefter på "Næste".

NÆSTE

5. Fjern ur og smykker fra testhånden.



Tryk derefter på "Næste".

NÆSTE

6. Indtast den 4-cifrede PIN-kode fra lægen eller udbyderen og tryk "Enter".

INDTAST PIN-KODE
Indtast din firecifrede PIN-kode og tryk ENTER

ENTER

7. Sæt WatchPAT® ONE-enheten på den hånd, du ikke normalt bruger. Sørg for den ikke sidder for stramt eller løst.



Tryk derefter på "Næste".

NÆSTE

8. Tag brystsensoren (snorke- og kropssensor) og før kablet gennem dit ærme og ud gennem halsåbningen. Fjern tapen fra mærkaten, og fastgør sensoren lige under dit sternale hak.




Tryk derefter på "Næste".

NÆSTE

* Hvis WatchPAT® ONE-enheten ikke inkluderer en brystsensor, skal du gå til næste trin.

9. Placer proben på fingeren på den hånd, du ikke normalt bruger. Du kan bruge alle fingre undtagen tommelfingeren. Proben skal indsættes, så klistermærkets top er placeret over fingerneglen. Hold proben mod en hård overflade og træk langsomt den øverste tap mod dig for at fjerne proben.

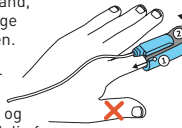

Tryk derefter på "Næste".

NÆSTE

10. Du er nu færdig. Et par sidste trin, før du begynder søvnstudiet:

- a. Sørg for, at mobiltelefonen ikke er længere end 5 meter fra WatchPAT® ONE-enheten.
- b. Slå alle transmitterende enheder i rummet fra, såsom smartphones, smartwatches og hovedtelefoner, der kan påvirke testen.
- c. Tilslut din telefon til opladeren og lad blive der hele natten. Hvis du er nødt til at stå op i løbet af natten, skal telefonen blive, hvor den er.

Klik nu på knappen "Start" for at begynde søvnstudiet.

START

11. Når du vågner op næste morgen, trykkes på knappen "Afslut optagelse" og vent et par minutter, før enheden afslutter dataoverførslen. Efter dataoverførslen vil du modtage en bekræftelse.

AFSLUT OPTAGELSE

Efter modtagelse klikkes på "Luk app".

LUK APP

12. Fjern brystsensoren, proben og WatchPAT® ONE-enheten.

For andre lande end USA: Det er ikke påkrævet at beholde eller aflevere udstyret. Du kan blot smide den ud.

For USA: Ønsker du at deltage i WatchPAT® ONE Green Program, kan du returnere udstyret med den medfølgende forudbetalt returlabel. Når testen er udført, placeres udstyret i en kasse, mærkaten sættes på kassen som vist og sendes til korrekt miljøbehandling hos os. Det er gratis. Vælger du at deltage i WatchPAT® ONE Green Program, behøver du ikke beholde udstyret eller returnere det. Du kan blot smide den ud.