

WatchPAT⁺ ONE

Vienreizējās lietošanas mājas miega apnojas tests

Lai saņemtu detalizētu video instrukciju, lūdzu, apmeklējiet

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT⁺ ONE

Vienreizējās lietošanas mājas miega apnojas tests



Ja jums rodas kādi jautājumi,
varat sazināties
ar Itamar[®] Medical
palīdzības dienestu:
1-888-748-2627

Instrukcijas soli pa solim

Skenējiet QR kodu zemāk, lai
lejupielādētu WatchPAT[®] ONE lietotni



itamar
medical
www.itamar-medical.com

Tehniskās informācijas marķējums

	Uzmanību! Saņemšanā ar ASV Federālajiem tiesību aktiem šo ierīci drīkst pārdot tikai ārsts vai pēc ārsta rīkojuma
	Vienreizlietojama, nelietot atkārtoti
	Temperatūras limits 0°C - 40°C
	Skatīt lietošanas norādījumus
	Baterijas darbības spriegums
	Aizsardzības pakāpe pret svešķermeņu un mitruma iekļūšanu
	BF tipa saskares daļa
	ASV Federālās sakaru komisijas piešķirtais identifikācijas numurs
	Medicīniskās ierīces ražotājs
	Numurs katalogā
	Sērijas numurs
	Izgatavošanas datums
	Derīguma termiņš
	Saskaņā ar EIEA direktīvu 2012/19/ES visi elektrisko un elektronisko iekārtu (EIE) atkritumi ir jānodod atbilstoši, nevis jāizmet kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, atbilstīgi un videi draudzīgi atbrīvojieties no šīs iezīrijādājuma un tā daļām.
	Trausla, rīkoies uzmanīgi
	Turēt sausu
IC: 27705-WATCHPATONE Kanādas ISED sertifikācijas numurs	
HYM: WatchPAT ONE Identificējošā iezīrijādājuma versijas aparāturs tehniskā raksturojuma	
	Medicīniskā ierīce
	Japānas sertifikācijas simboli

REF:DMC193482 - E4.3

itamar
medical
www.itamar-medical.com



Svarīgas piezīmes

- Glabāšanas un lietošanas temperatūra 0°C - 40°C
- Nemēģiniet savienot vai atvienot ierīces daļu.
- Nemēģiniet ievietot ierīci svešķermeņus.
- Nekādā ziņā nemēģiniet patstāvīgi novērst kļūmi.
- WatchPAT⁺ONE nevajadzētu radīt nekādu diskomfortu un sāpnes. Ja rodas nepanesams diskomforts, noņemiet ierīci un zvaniet palīdzības dienestam.
- Pirms ievietošanas vizuāli pārbaudiet bateriju, lai pārliecinātos, ka tā nav uzbriedusi, saplaisājusī, nav nopļūdusī vai arī tai nav citu defektu.



Itamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3086900, Izraēla
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598

EC REP Arazy Group GmbH

The Square 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main
Vācija

Lai saņemtu detalizētu video instrukciju
lūdzu, apmeklējiet vietni: watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Vienreizējās lietošanas mājas miega apnojas tests

Instrukcijas soli pa solim


Šī pamācība jums soli pa solim parādīs, kā pareizi lietot WatchPAT® ONE mājas miega apnojas testu.

Pirms uzliekat WatchPAT® ONE:

- Ierīci WatchPAT® ONE ir ieteicams uzlikt uz tās rokas, kura nav jūsu dominējošā roka.
- Uzliktni var uzlikt uz jebkura pirksta, izņemot īkšķi.
- Pirms lietošanas novelciet piegulošas drēbes, gredzenus, pulksteņus un citas rotaslietas.
- No izmeklējamā pirksta noņemiet nagu laku un mākslīgo nagu, kā arī raugieties, lai nags būtu īss.

Ievērojiet: izmantojiet tikai sārnu AAA bateriju. Neievietojiet bateriju, līdz esat gatavi doties gulēt.

1. Pirms miega pētījuma veikšanas pārliecinieties, ka jums ir pieejams internets, tālrunis, WatchPAT® ONE ierīce un PIN numurs.

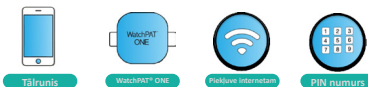

2. Lejupielādējiet mobilajā ierīcē WatchPAT® ONE lietotni (pieejama Apple App Store un Google Play Store).



3. Atveriet WatchPAT® ONE lietotni un sniedziet visas prasītās atļaujas. Šīs atļaujas ir nepieciešamas lietotnes darbībai.

Izņemiet WatchPAT® ONE no kastes. Jūs varat noklikšķināt pogu "Priekšskatīt" lietotnē, lai skatītu īsu ceļvedi, kas jums parādīs, kā ierīci uzstādīt.


PRIEKŠSKATĪT

Kad tas paveikts, nospiediet pogu "Gatavs".

GATAVS

4. Ievietojiet bateriju WatchPAT® ONE ierīcē.

Kad tas paveikts, nospiediet "Tālāk".

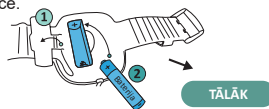

5. No izmeklējamās rokas novelciet pulksteņus un rotaslietas.

Kad tas paveikts, nospiediet "Tālāk".




6. Ievadiet 4 ciparu PIN kodu, ko sniedzis jūsu ārsts vai pakalpojumu sniedzējs, un nospiediet "Ievadīt".



7. Uzlieciet WatchPAT® ONE ierīci uz rokas, kas nav jūsu dominējošā roka. Pārliecinieties, ka ierīce nav pārāk cieša vai vaļīga.

Kad tas paveikts, nospiediet "Tālāk".

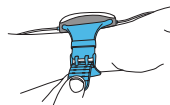

8. Paņemiet krūškurvja sensoru (krākšanas un ķermeņa stāvokļa sensoru) un velciet kabeli caur piederūni un ārā caur kakla atveri. Noņemiet plāksnīti no uzlīmes un piestipriniet sensoru tieši zem krūšu kaula iegriezuma.

Kad tas paveikts, nospiediet "Tālāk".



* Ja jūsu WatchPAT® ONE ierīce neietver krūškurvja sensoru, izlaidiet šo soli.

9. Līdz galam uzlieciet uzliktni uz tās rokas pirksta, kas nav jūsu dominējošā roka. Jūs varat izmantot jebkuru pirkstu, izņemot īkšķi. Uzliktnis jānovieto tā, lai uzlīme ar atzīmi TOP atrastos virs pirksta naga. Turiet uzliktni pie cietas virsmas un lēnām pavelciet TOP plāksnīti pie sevis, lai noņemt to no uzliktna.

Kad tas paveikts, nospiediet "Tālāk".



10. Viss ir gatavs. Daži pēdējie soļi, pirms sākat savu miega pētījumu:

- a. Pārliecinieties, ka jūsu tālrunis atrodas ne tālāk kā 5 metrus no WatchPAT® ONE ierīces.
- b. Izslēdziet visas pārējās radošās ierīces telpā, piemēram, viedpulksteņus, citus viedtālrunus un austiņas, jo tās var traucēt izmeklējuma norisi.
- c. Pievienojiet tālruni lādētājam; tam jābūt pieslēgtam visu nakti. Ja nakts laikā jums nepieciešams piecelties, atstājiet tālruni pieslēgtu; nav nepieciešams to nēsāt līdzi.

Taigad noklikšķiniet pogu "Ieslēgt", lai sāktu miega pētījumu.

IESLĒGT

11. No rīta pamostoties nospiediet pogu "Pabeigt ierakstīšanu" un pagaidiet dažas minūtes, līdz ierīce pabeigs datu pārraidi. Pēc datu pārsūtīšanas pabeigšanas saņemsit pateicības paziņojumu.

Pēc saņemšanas nospiediet "Aizvērt lietotni".

PABEIGT IERAKSTĪŠANU

AIZVĒRT LIETOTNI

12. Noņemiet krūškurvja sensoru, uzliktni un WatchPAT® ONE ierīci.

Ārpus ASV: ierīci nav nepieciešams paturēt vai atgriezt. Jūs varat vienkārši atbrīvoties no tās.

ASV: ja vēlaties piedalīties WatchPAT® ONE Green programmā, varat atgriezt ierīci, izmantojot pievienoto apmaksāto atgriešanas etiķeti. Pēc testa pabeigšanas ievietojiet ierīci kastē, uzlīmējiet uz kastes etiķeti, kā parādīts attēlā, un nosūtiet to mums pienācīgai apstrādei, lai aizsargātu vidi. Par šo pakalpojumu nav jāmaksā. Ja izvēlaties nepiedalīties WatchPAT® ONE Green programmā, ierīce nav jāsaņem atpakaļ vai jāatgriež. Jūs varat vienkārši atbrīvoties no tās.