

# WatchPAT™ ONE

Jednorázový domácí test na spánkovou apnoe

## Ekologický program WatchPAT™ ONE Green Program

Abyste se mohli zúčastnit programu WatchPAT™ ONE Green Program\*, musíte po provedení spánkového testu postupovat takto:

1. Vyjměte ze zařízení WatchPAT™ ONE baterii a vraťte zařízení do krabice.
2. Navštivte web: [www.itamar-medical.com/greenprogram](http://www.itamar-medical.com/greenprogram), vyplňte formulář a vytiskněte si předplacený poštovní štítek.
3. Štítek nalepte na krabici a tu nám zašlete zcela zdarma zpět.

Děkujeme za váš příspěvek k ochraně životního prostředí!

\*Program WatchPAT™ ONE Green Program je k dispozici pouze v některých zemích.

### ⚠ Důležité poznámky:

- Test WatchPAT™ ONE je indikován u pacientů s podezřením na dýchací potíže související se spánkem.
- Test WatchPAT™ ONE je určen k jednorázovému použití. Opakované použití produktů určených k jednorázovému použití může způsobit křížovou kontaminaci.
- V případě závažné nežádoucí příhody si další pokyny vyžádejte od odborného zdravotnického pracovníka a servisní pobočky společnosti Itamar.
- Teploty skladování a provozu 0 °C – 40 °C.
- Žádnou část jednotky se nepokoušejte připojit nebo odpojit.
- Nesnažte se do zařízení zavádět jakýkoli cizí předmět.
- V žádném případě se nepokoušejte zařízení WatchPAT™ ONE opravit vlastními silami.
- Použití testu WatchPAT™ ONE by nemělo působit žádné nepříjemné pocity ani bolest. Setkáte-li se s nesnesitelně nepříjemnými pocity, sundejte zařízení WatchPAT™ ONE a telefonicky kontaktujte zákaznické služby.
- Baterii před vložením vizuálně zkontrolujte, zda není zdeformovaná, prasklá, neteče nebo nevykazuje jinou vadu.
- Před použitím testu WatchPAT™ ONE je nutné, aby zdravotníci pacienta proškolili.



Podrobné video pokyny jsou k dispozici na adrese [watchpatone-howtouse.com](http://watchpatone-howtouse.com)



**Budete-li mít nějaké otázky, obraťte se na  
zákaznický servis ZOLL Itamar™:  
1-888-748-2627**

# WatchPAT™ ONE

Jednorázový domácí test na spánkovou apnoe



## ZOLL itamar

## Podrobný návod k použití

**Itamar Medical Ltd.**  
9 Halamish Street, PO 3579  
Caesarea 3088900, Izrael  
T: +972-4-6177000,  
F: +972-4-6275598

**Arazy Group GmbH**  
The Squire 12, Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main  
Německo

[lp.itamar-medical.com/symbols-glossary](http://lp.itamar-medical.com/symbols-glossary)

2797

Pro stažení aplikace  
WatchPAT™ ONE  
naskenujte níže  
uvedený QR kód.



**ZOLL itamar**

Tento návod vás podrobně provede celým postupem a ukáže vám, jak správně používat domácí test na spánkovou apnoe WatchPAT™ONE.

#### Před přiložením přístroje WatchPAT™ONE:


- + Zkontrolujte, zda máte přístup na internet, svůj telefon, zařízení WatchPAT™ONE a kód PIN.
- + Sundejte si těsné oblečení, šperky a doplňky.
- + Použijte prst na ruce, která u vás není dominantní. Nepoužívejte palec (máte-li velké prsty, použijte malíček).
- + Na vybraném prstu si zastříhnete nehet, případně odstraňte lak nebo sundejte umělý nehet.


Poznámka: Používejte pouze alkalické baterie typu AAA. Baterie do přístroje nekládejte, dokud nejste připraveni uložit se ke spánku.

1. Stáhněte aplikaci WatchPAT™ONE do telefonu (k dispozici v obchodě App Store a Google Play).

2. Otevřete aplikaci WatchPAT™ONE a udělte požadovaná oprávnění. Tato oprávnění jsou nezbytná, aby aplikace správně fungovala. Vyjměte přístroj WatchPAT™ONE z krabice. Chcete-li zobrazit tutoriál k aplikaci, kde se dozvíte, jak zařízení WatchPAT™ONE připravit, klikněte na odkaz stručného návodu k použití. Až budete připraveni, stiskněte tlačítko „Begin Setup“ (Zahájit přípravu).


Zahájit přípravu

3. Vložte do přístroje WatchPAT™ONE baterii. Až budete hotovi, stiskněte tlačítko .

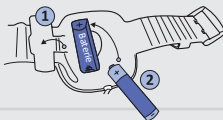

4. Příprava:


- Dbejte na to, aby byl telefon zapojený do elektrické sítě přes noc a nebyl v režimu letadlo.
- V místnosti vypněte všechna zbytečná elektronická zařízení.
- Dbejte na to, aby se váš telefon nenacházel dále než 5 metrů (15 stop) od přístroje WatchPAT™ONE.
- Zapotřebí je alespoň 6hodinový záznam dat.

5. Zadejte 4místný kód PIN, který vám sdělil váš lékař nebo zdravotnické zařízení, a stiskněte tlačítko .




6. Přístroj WatchPAT™ONE umístěte na ruku, která není dominantní. Dbejte na to, aby přístroj nebyl příliš utažený, ale ani volný.




Až budete hotovi, stiskněte tlačítko .

7. Je-li vaše zařízení WatchPAT™ONE vybaveno hrudním čidlem:

- V případě potřeby zastříhnete ochlupení na hrudi, aby mohlo být čidlo připevněno přímo na kůži.
- Protáhněte čidlo rukávem až k výstřihu.
- Ze zadní části čidla sloupněte bílý papír.
- Upevněte čidlo do středu horní části hrudní kosti, přímo pod horním trojúhelníkem hrudní kosti.
- Čidlo doporučujeme k hrudi zajistit náplastí. Až budete hotovi, stiskněte tlačítko .



8. Prst, na kterém test provádíte, zasuňte celý do čidla. Když se podíváte na hřbet ruky, musí být vidět štítek s označením TOP. Špičku čidla zatlačte proti tvrdému povrchu (např. stolu) a pomalu zatáhněte za štítek TOP směrem vzad, abyste ho sundali z čidla.

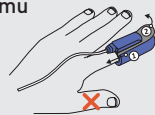

9. Spánkovou studii zahájíte kliknutím na tlačítko „Start recording“ (Zahájit záznam). Dbejte na to, aby byl telefon připojený k nabíječce.

Zahájit záznam

10. Ráno stiskněte tlačítko „Stop Recording“ (Ukončit záznam) a vyčkejte, než zařízení WatchPAT™ONE dokončí přenos dat. Po dokončení přenosu dat obdržíte zprávu s blahopřáním k úspěšnému dokončení testu.

Ukončit záznam

Zavřít aplikaci

Poté stiskněte tlačítko Close App (Zavřít aplikaci).

11. Sundejte hrudní snímač, snímač z prstu a přístroj WatchPAT™ONE. Zařízení WatchPAT™ONE zlikvidujte v souladu s místními předpisy.