

# WatchPAT<sup>®</sup> ONE

Tek Kullanımlık Ev Tipi Uyku Apnesi Testi

Adım-adım video talimatı için lütfen şu adresi ziyaret edin:

[watchpatone-howtouse.com](http://watchpatone-howtouse.com)

# WatchPAT<sup>®</sup> ONE

Tek Kullanımlık Ev Tipi Uyku Apnesi Testi



## Teknik Bilgi Etiket Açıklaması

	Uygun: Federal yasalar, bu cihazın yalnızca tıbbi amaçlı bir sağlık uzmanı tarafından veya sağlık uzmanının siparişiyle satışına izin verir.
	Tek kullanımlıdır, yeniden kullanmayın
	Sıcaklık limiti 0°C - 40°C
	Kullanım talimatına başvurun
	Pil çalışma voltajı
	Giriş koruması
	BF tipi uygulamalı parça
	Federal İletişim Komisyonu kimlik numarası 24PL00502E
	Tıbbi cihaz Üreticisi
	Katalog numarası
	Seri numarası
	Üretim tarihi
	Son kullanma tarihi
	2012/19/EU sayılı WEEE Direktifine göre, tüm atık elektrikli ve elektronik ekipman (EEE) ayrı toplanmalı ve normal evsel atıklarıyla birlikte bertaraf edilmemelidir. Lütfen bu ürünü ve tüm parçalarını sorumlu biçimde ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edin.
	Kırtılabılır, dikkatli taşıyın
	Kuru tutun
	IC: 27705-WATCHPATONE İSED Kanada sertifikası numarası
	HVIR: WatchPAT ONE Bir ürün versiyonunun donanım teknik özelliklerini tanımlar
	Tıbbi Cihaz
	Japonya sertifikası sembolleri

REF: DMCI193489 - Ed. 3

Sorularınız olursa  
aşağıdaki numaradan  
İtamar<sup>®</sup> Medical Yardım  
Masası ile iletişim  
kurabilirsiniz:  
1-888-748-2627

www.itamar-medical.com

## Adım-Adım Talimat Kılavuzu

WatchPAT<sup>®</sup> ONE Uygulamasını indirmek için aşağıdaki QR Kodu tarayın



www.itamar-medical.com



### Önemli Notlar:

- Saklama ve çalışma sıcaklıkları 0°C - 40°C
- Ünitinin herhangi bir parçasını bağlama veya bağlantısını kesme girişiminde bulunmayın.
- Ünitinin içine herhangi bir yabancı cisim sokmaya çalışmayın.
- Hiçbir koku altında herhangi bir sorunu kendiniz onarmaya çalışmayın.
- WatchPAT<sup>®</sup>ONE ünitesinin herhangi bir rahatsızlık veya ağrıya neden olması beklenmez. Dayanılmaz bir rahatsızlık hissederseniz, cihazı çıkarın ve yardım masasını arayın.
- Takmadan önce pili herhangi bir şişme, çatlak, sızıntı olmadıysa ve başka bir kusuru bulunmadığından emin olmak için görsel olarak inceleyin.



**Itamar Medical Ltd.**  
9 Halamish Street, PO 3579  
Caesarea 3086500 İsrail  
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598



**Arazy Group GmbH**  
The Square 12, Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main  
Almanya

Adım-adım video talimatı için  
[watchpatone-howtouse.com](http://watchpatone-howtouse.com) adresini ziyaret edin



## WatchPAT® ONE

### Tek Kullanımlık Ev Tipi Uyku Apnesi Testi Adım-Adım Talimat Kılavuzu

Bu kılavuz sizi adım-adım yönlendirecek ve WatchPAT® ONE Ev Tipi Uyku Apnesi Testinin nasıl doğru kullanıldığını size gösterecektir.

#### WatchPAT® ONE cihazını uygulamadan önce:

- WatchPAT® ONE cihazını baskın olmayan elinize uygulamamız önerilir.
- Prob, başparmak dışında herhangi bir parmağa takılabılır.
- Kullanmadan önce, sıkı giysileri, yüzükleri, saatleri ve diğer takıları çıkarın.
- Test parmağındaki oje ve yapay tırnakları çıkarın ve tırnağın kısa kesildiğinden emin olun.

**Not:** Sadece Alkalin AAA pil kullanın.  
Uyumaya hazır olana kadar pili takmayın.

1. Uyku testine geçmeden önce, internet erişimimiz, telefonunuz, WatchPAT® ONE cihazınız ve PIN numaranız olduğundan emin olun.



Telefon



WatchPAT® ONE



İnternet Erişimi



PIN Numarası

2. WatchPAT® ONE uygulamasını mobil cihazınıza indirin (Apple App Store ve Google Play Store'dan edinilebilir).



3. WatchPAT® ONE uygulamasını indirin ve uygulamanın gerektirdiği tüm izinleri verin. Bu izinler uygulamanın çalışması için gereklidir.


WatchPAT® ONE cihazını kutudan çıkarın. Uygulamada "Preview" (Önizleme) düğmesini tıklayarak cihazın kurulumunu gösteren bir hızlı turu izleyebilirsiniz.

Hazır olduğunuzda "Ready" (Hazır) düğmesine basın.

ÖNİZLEME

HAZIR


4. Pili WatchPAT® ONE cihazına yerleştirin.

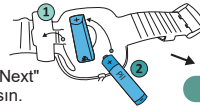

Hazır olduğunuzda "Next" (İleri) düğmesine basın.

İLERİ

5. Test elinizden kol saatinizi ve takılarınızı çıkarın.

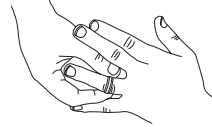

Hazır olduğunuzda "Next" (İleri) düğmesine basın.


İLERİ

6. Hekiminizin muayenesinde veya uzman tarafından verilen 4 basamaklı PIN kodunu girin ve "Enter" (Giriş) tuşuna basın.

**PIN KODUNU GİRİN**  
Belirlemiş özet basamaklı PIN (Kısayat Kimlik Numarası) kodunu girin ve ENTER (GİRİŞ) tuşuna basın

GİRİŞ

7. WatchPAT® ONE cihazını baskın olmayan elinize yerleştirin. Çok sıkı veya çok gevşek olmadığından emin olun.

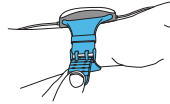

Hazır olduğunuzda "Next" (İleri) düğmesine basın.

İLERİ

8. Göğüs sensörünü (hormala ve vücut konum sensörü) alın ve kabloyu giysi kolunuzun içinden geçirip boyun açıklığından çıkarın. Etiketkin arkasındaki kağıdı çıkarın ve sensörü göğüs kemiği girişinizin hemen altına takın.




Hazır olduğunuzda "Next" (İleri) düğmesine basın.

\* WatchPAT® ONE cihazınızda göğüs sensörü yoksa, bu adımı atlayın.

İLERİ

9. Probu, baskın olmayan elinizin bir parmağına sonuna kadar yerleştirin. Başparmak dışında herhangi bir parmağınızı kullanabilirsiniz. Prob, TOP (ÜST) yazılı etiket tırnağın üstünde olacak şekilde takılmalıdır.

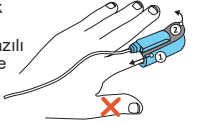

Probu sert bir yüzeye temas edecek şekilde tutun ve TOP (ÜST) etiketini kendinizde doğru yavaşaça çekerek probdan çıkarın.

Hazır olduğunuzda "Next" (İleri) düğmesine basın.

İLERİ

10. Şimdi tam olarak hazırsınız. Uyku testinizde başlamadan önceki son birkaç adım:

- a. Telefonunuzun WatchPAT® ONE cihazından en fazla 5 metre uzaklıkta olduğundan emin olun.
- b. Başka akıllı telefonlar, akıllı saatler ve kulaklıklar gibi odadaki tüm diğer verici cihazları kapatın, çünkü testi etkileyebilirler.
- c. Telefonunuzun şarj cihazına bağlayın, gece boyunca takılı kalmalıdır. Geceleyin yataktan kalkmanız gerekirse, telefonu takılı tutun, yanınızda taşımamız gerekmez.

Şimdi uykuyu testinizi başlatmak için "Start" (Başlat) düğmesini tıklayın.

BAŞLAT

11. Sabahleyin uyandıığınızda, "End Recording" (Kaydı Sonlandır) düğmesine basın ve cihazın veri iletimini tamamlaması için birkaç dakika bekleyin. Veri iletimi tamamlandıktan sonra, bir teşekkür mesajı alacaksınız.

Mesaj alındığında "Close Application" (Uygulamayı Kapat) düğmesine basın.

KAYDI SONLANDIR

UYGULAMAYI KAPAT

12. Göğüs sensörü, prob ve WatchPAT® ONE cihazını çıkarın.

**ABD dışı için:** Cihazın saklanması veya iade edilmesi gerekmez. Sadece atmanız yeterlidir.

**ABD için:** WatchPAT® ONE Green Programının parçası olmak istiyorsanız, cihazı sağlanan ön ödeme iade etiketini kullanarak iade edebilirsiniz. Test tamamlandıktan sonra, cihazı kutuya koyun, etiketi gösterilen şekilde kutuya yapıştırın ve çevrenin korunması için uygun şekilde işlenen ükide tarafımıza gönderin. Bu hizmet ücretsizdir. WatchPAT® ONE Green Programına katılmak istemezseniz, cihazın saklanması veya iade edilmesi gerekmez. Sadece atmanız yeterlidir.