

WatchPAT ONE

Test pentru apnee în somn, de unică folosință, pentru utilizare la domiciliu

Pentru instrucțiuni video pas cu pas,
accesați

watchpatone-howtouse.com

WatchPAT ONE

Test pentru apnee în somn, de unică folosință, pentru utilizare la domiciliu



**Dacă aveți întrebări,
puteți contacta Biroul de
asistență Itamar® Medical
la numărul de telefon:
1-888-748-2627**

Etichetă cu informații tehnice

	Atenție: Conform legii federale, acest dispozitiv poate fi comercializat numai de către sau la prescripția unui cadru medical autorizat.
	De unică folosință, a nu se reutiliza
	Limita de temperatură 0°C - 40°C
	Consultați instrucțiunile de utilizare
	Tensiune de funcționare a bateriei
	Protecție împotriva pătrunderii particulelor străine
	Componentă în contact cu pacientul, de tip BF
	Număr de identificare al comisiei federale de comunicații
	Fabricantul dispozitivului medical
	Număr de catalog
	Număr de serie
	Data fabricației
	Data de expirare
	Conform Directivei DEEE 2012/19/UE, toate deseurile de echipamente electrice și electronice (EEE) trebuie colectate separat și nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile casnice obișnuite. Eliminați acest produs și toate părțile acestuia în mod responsabil și ecologic.
	Fragil, manipulați cu atenție
	A se feri de umiditate
IC: 27705-WATCHPATONE Număr certificare ISED Canada	
HYFN: WatchPAT ONE Identifică specificațiile hardware ale versiunii unui produs	
	Dispozitiv medical
	Simboluri de certificare japoneze

REF:DMC193480 - Ed. 3

itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com



Note importante:

- Temperaturi de depozitare și funcționare 0°C - 40°C
- Nu încercați să conectați sau să deconectați nicio parte a aparatului.
- Nu încercați să introduceți obiecte străine în aparat.
- În niciun caz nu încercați să remediați o problemă fără a solicita asistență.
- Dispozitivul WatchPAT ONE nu ar trebui să provoace disconfort sau durere. În cazul în care simțiți disconfort insuportabil, îndepărtați dispozitivul și apelați biroul de asistență.
- Inspectați vizual bateria înainte de a o introduce, pentru a vă asigura că nu este umflată sau crăpată, că nu curge sau prezintă alte defecte.

Itamar Medical Ltd.
9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3086900, Israel
T: +972-4-61177000, F: +972-4-6275598

EC REP Arazy Group GmbH
The Square 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Germany

Ghid de instrucțiuni pas cu pas

Scanați codul QR de mai jos pentru a
descărca aplicația WatchPAT® ONE



itamar[®]
medical
www.itamar-medical.com

Pentru instrucțiuni video pas cu pas
Accesați watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE

Test pentru apnee în somn, de unică folosință, pentru utilizare la domiciliu
Ghid de instrucțiuni pas cu pas


Acest ghid vă va îndruma pas cu pas, arătându-vă cum să utilizați corect testul pentru apnee în somn, pentru utilizare la domiciliu WatchPAT® ONE.

Înainte de a aplica WatchPAT® ONE:

- Se recomandă aplicarea dispozitivului WatchPAT® ONE pe mâna non-dominantă.
- Sonda poate fi purtată pe orice deget, cu excepția degetului mare.
- Înainte de utilizare, îndepărtați hainele strâmte, inelele, ceasurile și alte bijuterii.
- Eliminați lacul de unghii și unghia artificială de pe degetul utilizat pentru test și asigurați-vă că unghia este tăiată scurt.

Notă: Utilizați numai o baterie alcalină AAA.
Nu introduceți bateria până când nu sunteți gata de culcare.

1. Înainte de a începe studiul de somn, asigurați-vă că aveți acces la internet, telefonul, dispozitivul WatchPAT® ONE și codul PIN.

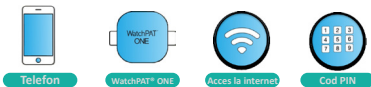

2. Descărcați aplicația WatchPAT® ONE pe dispozitivul dvs. mobil (disponibilă în Apple App Store și Google Play).



3. Deschideți aplicația WatchPAT® ONE și accordați toate permisiunile cerute de aplicație. Aceste permisiuni sunt necesare pentru funcționarea aplicației.


Scoateți dispozitivul WatchPAT® ONE din cutie. Puteți face clic pe butonul „Previzualizare” din aplicație pentru a face un tur rapid, care vă arată cum să configurați dispozitivul.

PREVIZUALIZARE

Apăsați „Gata” când ați terminat.


GATA

4. Introduceți bateria în dispozitivul WatchPAT® ONE.

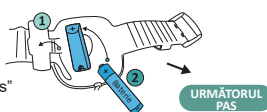

Apăsați „Următorul pas” când sunteți gata.

5. Scoateți-vă ceasul și bijuteriile de pe mâna la care utilizați testul.

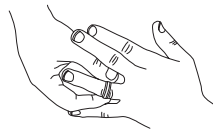

Apăsați „Următorul pas” când sunteți gata.


URMĂTORUL PAS

6. Introduceți codul PIN din 4 cifre furnizat de cabinetul medicului dvs. sau de furnizorul dvs. și apăsați tasta „Intrare”.



INTRARE

7. Puneți dispozitivul WatchPAT® ONE pe mâna non-dominantă. Asigurați-vă că nu este prea strâns și nici prea lejer.

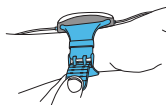

Apăsați „Următorul pas” când sunteți gata.

URMĂTORUL PAS

8. Luați senzorul toracic (senzorul pentru sforăit și poziția corpului) și direcționați cablul prin interiorul mâinii și scoateți-l prin deschizătura de la gât. Îndepărtați mica folie de protecție de pe partea adezivă și aplicați senzorul chiar sub creștătura sternului.




Apăsați „Următorul pas” când sunteți gata.

URMĂTORUL PAS

* Dacă dispozitivul WatchPAT® ONE nu include senzorul toracic, săriți peste acest pas.

9. Poziționați sonda pe un deget al mâinii non-dominante, introducând degetul până la capăt. Puteți folosi orice deget, cu excepția degetului mare. Sonda trebuie introdusă astfel încât partea adezivă marcată TOP (VÁRF) să fie poziționată deasupra unghiei. Țineți sonda pe o suprafață dură și trageți încet mica folie de protecție de pe suprafața marcată TOP (VÁRF) către dvs. pentru a o scoate din sondă.

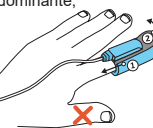

Apăsați „Următorul pas” când sunteți gata.

URMĂTORUL PAS

10. Sunteți gata. Ultimii câțiva pași înainte de începerea studiului de somn:
 - a. Asigurați-vă că telefonul se află la cel mult 15 ft/5 metri de dispozitivul WatchPAT® ONE.
 - b. Oprți toate celelalte dispozitive de transmisie din cameră, cum ar fi alte telefoane inteligente, ceasuri inteligente și câști, deoarece acestea ar putea interfera cu testul.
 - c. Conectați-vă telefonul la încărcător; acesta trebuie să rămână în priză toată noaptea. Dacă trebuie să vă ridicați din pat în timpul nopții, lăsați telefonul conectat la priză, nu este nevoie să îl luați cu dvs.

Acum faceți clic pe butonul „Start” pentru a începe studiul de somn.

START

11. Dimineța, când vă treziți, apăsați butonul „Sfârșitul înregistrării” și așteptați câteva minute pentru ca dispozitivul să finalizeze transmisia de date. După finalizarea transmisiei de date, veți primi un mesaj de mulțumire. După primirea mesajului, apăsați „Close Application” (Închidere aplicație).

SFARȘITUL ÎNREGISTRĂRII
ÎNCHIDERE APLICAȚIE

12. Îndepărtați senzorul toracic, sonda și dispozitivul WatchPAT® ONE.

Pentru alte țări decât SUA: Nu este nevoie să păstrați dispozitivul sau să-l returnați. Îl puteți arunca.

Pentru SUA: Dacă doriți să participați la programul WatchPAT® ONE Green, puteți returna dispozitivul folosind eticheta de retur preplătit furnizată. La finalizarea testării, introduceți dispozitivul în cutie, aplicați eticheta pe cutie așa cum se arată și trimiteți-l la noi pentru o prelucrare adecvată în scopul protecției mediului. Acest serviciu este gratuit. Dacă alegeți să nu participați la programul WatchPAT® ONE Green, nu este nevoie să păstrați dispozitivul sau să-l returnați. Îl puteți arunca.