


+ Korak 4 – Uključivanje uređaja

Napomena: uređaj treba uključiti samo kada ste spremni za spavanje.

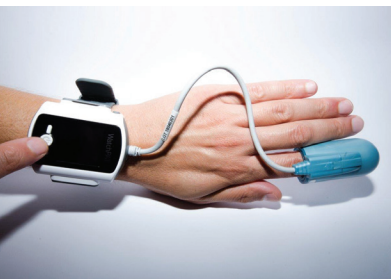

4a. Čvrsto pritisnite dugme za napajanje dok se ekran ne upali. Sledeći ekran „Please wait Testing...“ (Molimo sačekajte testiranje...) Posle nekoliko sekundi pojaviće se poruka „GOOD NIGHT!!!“ ✓ (LAKU NOĆ!!!). Ekran će se isključiti nakon kratkog perioda.

4b. U slučaju da postoji problem, pojaviće se „TEST ABORTED“ ✗ (TEST JE PREKINUT). Pozovite službu za pomoć na 1-888-748-2627
Sada ste spremni za spavanje.

4c. U slučaju da vaš prst nije unutar sonde, pojavljuje se greška koja vas upućuje da ubacite prst. Sačekajte da se uređaj isključi, ubacite prst i pokušajte ponovo.

+ Korak 5 – Tokom noći

- Svaki put kada pritisnete dugme, ekran će zasvetleti na minut.
- Ako treba da ustanete tokom noći, nemojte skidati uređaj ili senzore.
- Ne pritiskajte nijedno dugme ako morate da ustanete tokom noći.
- Ako koristite kupatilo, nemojte kvasiti uređaj WatchPAT™ 300.
- WatchPAT™ 300 ne bi trebalo da izaziva nelagodnost ili bol. Ako osetite nepodnošljivu nelagodnost, skinite uređaj i pozovite službu za pomoć.

+ Korak 6 – Sledećeg jutra

Kada se probudite:

- 6a.** Uređaj će se automatski isključiti. Ne postoji dugme za isključivanje.
- 6b.** Skinite sondu za prst i senzor RESBP
- 6c.** Skinite uređaj sa zgloba.
- 6d.** Vratite sve delove u torbu za nošenje.



Važne napomene

- Ne pokušavajte da povežete ili isključite bilo koji deo jedinice.
- Ne pokušavajte da ubacite bilo kakav strani predmet u jedinicu.
- Ne pokušavajte da povežete WatchPAT™ 300 sa električnim napajanjem ili drugim uređajem, mašinom ili računarom.
- Ni u kom slučaju ne pokušavajte sami da rešite problem.
- Sonda za prst je za jednokratnu upotrebu. U slučaju da je povezana već korišćena sonda, pojaviće se poruka o grešci. Imajte na umu da upotreba već korišćene sonde može da izazove unakrsnu kontaminaciju.
- Ako je potrebno, ili u slučaju ozbiljnog incidenta, kontaktirajte naš servis da biste prijavili incident i da biste dobili dalja uputstva.
- U slučaju ozbiljnog incidenta, prijavite ga i nadležnom organu.

**Imate li pitanja?
Pozovite broj naše službe za
pomoć
1-888-748-2627**

REF: OMT19380-sr Rev. 5.02.2023.



Vodič korak po korak

WatchPAT™ 300
Kućni test za spavanje:



Za video sa uputstvom idite na:
www.watchpat-howtouse.com

itamar™
medical

itamar™
medical

| Zdravlje na jednostavan način

www.itamar-medical.com | infousa@itamar-medical.com

Širom sveta:

Itamar Medical Ltd.
9 Haramish Street, PO 3579
Caesarea 3088900, Izrael
Tel. + 972 4 617 7000
Faks + 972 4 627 5598

SAD:

Itamar Medical Inc.
3290 Cumberland Club Drive, Suite
100 Atlanta, Georgia 30339, SAD
Tel. 1 888 748 2627

**ZASTUPNIK ZA EZ Arazy
Group GmbH**
The Squire 12, Am Flughafen,
60549 Frankfurt am Main,
Nemačka

Oprez: američki savezni zakon ograničava ovaj uređaj na prodaju samo od strane ili po nalogu ovlašćenog zdravstvenog radnika.

Autorska prava © 2023. Itamar Medical Ltd. WatchPAT i PAT su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci kompanije Itamar Medical Ltd., podružnice kompanije ZOLL Medical Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama.

WatchPAT™ 300 – Detaljni vodič

Ovaj vodič treba da se koristi nakon što vam lekar pokaže kako da koristite uređaj WatchPAT™ 300.



- A – Dugme za napajanje
- B – Senzor za respiratorni napor, hrikanje i položaj tela (RESBP)
- C – Sonda za prst

Pre primene uređaja WatchPAT™ 300:

- Preporučuje se da uređaj WatchPAT™ 300 stavite na svoju nedominantnu ruku.
- Sonda se može nositi na bilo kom prstu, osim na palcu. Ako imate velike prste, preporučuje se mali prst.
- Pre upotrebe skinite tesnu odeću, prstenje, satove i drugi nakit.
- Skinite lak za nokte i veštačke nokte sa prsta za testiranje i uverite se da je nokat odsečen na kratko.

Napomene:

- Kada uključite uređaj WatchPAT™ 300, on se ne može isključiti.
- Stavite uređaj i uključite ga tek kada ste spremni za spavanje.
- Možda će biti potreban nadzor odraslih kod primene uređaja.
- Slike u prikazanom vodiču su za levu ruku; sličan postupak se može primeniti i za desnu ruku.



Torbica za nošenje sadrži:

- Ovaj referentni vodič
- Uređaj sa sondom za prst
- Senzor za respiratorni napor, hrikanje i položaj tela (RESBP)

Broj službe za pomoć 1-888-748-2627



+ Korak 1 – Postavljanje senzora za respiratorni napor, hrikanje i položaj tela (RESBP)



1a. Za muškarce: skratite guste dlake na grudima, ako je potrebno.

1b. Provucite senzor RESBP kroz rukav spavačice do otvora za vrat.



1d. Zalepite senzor na centar gornjeg dela grudnog koša, odmah ispod prednjeg dela vrata. Uverite se da je slika na senzoru RESBP okrenuta nagore.



1c. Odlepite beli papir sa zadnje strane senzora.



1e. Pričvrstite senzor RESBP dodatnom medicinskom trakom.

+ Korak 2 – Postavljanje uređaja WatchPAT™ 300



- 2a.** Postavite uređaj na svoju nedominantnu ruku.
- 2b.** Zakopčajte kaiš (ne previše čvrsto).

+ Korak 3 – Postavljanje sonde za prst



- 3a.** Sonda se može nositi na bilo kom prstu, osim na palcu. Ako imate velike prste, preporučuje se mali prst.
- 3b.** Ubacite prst u sondu dok ne osetite njen kraj. Nalepnica sa oznakom TOP (VRH) treba da bude na vrhu vašeg prsta (iznad nokta).



- 3c.** Pritisnite vrh sonde o tvrdu površinu (tj. sto, nogar).
- 3d.** Povucite i uklonite jezičak TOP (VRH) u potpunosti iz sonde.